

novofine® Autocover® 30G

0,3x8 mm

Introducción

Por favor, lea detenidamente las instrucciones de este prospecto antes de usar NovoFine® Autocover®, aunque ya haya usado agujas NovoFine® con anterioridad.

No use la aguja sin la formación adecuada de un profesional de la salud.


NovoFine® Autocover® es una aguja para inyección estéril con un bloqueo de seguridad automático que reduce el riesgo de lesiones por pinchazo con la aguja. La cubierta de NovoFine® Autocover® oculta la aguja de la vista durante el uso. El indicador del bloqueo de seguridad indica que la aguja ha sido utilizada. La aguja es estéril cuando el sello protector y el capuchón de la aguja están intactos. Las agujas son PARA UN SOLO USO.

NovoFine® Autocover® no está recomendada para personas ciegas o con problemas de visión, sin la ayuda de una persona con visión plena y entrenada para usarla.

⚠ Información importante


Preste especial atención a estas notas, ya que son importantes para el uso seguro de la aguja.

⚠ Mantenga fuera del alcance de los niños las piezas pequeñas.

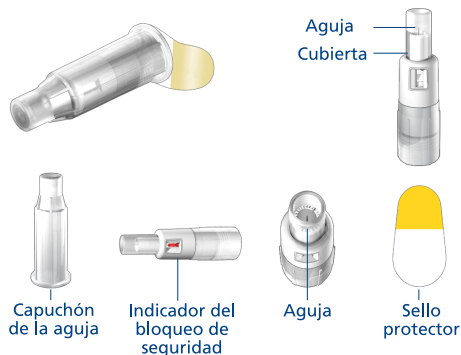


1 Montaje de NovoFine® Autocover®

- Coja una aguja nueva NovoFine® Autocover®.
- Compruebe que el sello protector y el capuchón de la aguja no tienen daños que puedan afectar a la esterilidad. Si observa cualquier daño use una nueva NovoFine® Autocover®.
- Retire el sello protector.
- Empuje la aguja directamente sobre la pluma. Gire hasta que esté apretada.

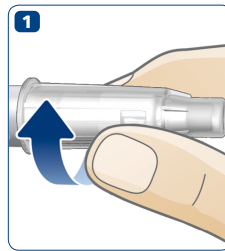

2 Retirada del capuchón de la aguja

- Retire el capuchón de la aguja y consérvelo.

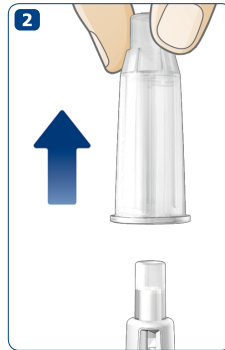

3 Comprobación del flujo (purgado)

Compruebe el flujo en el dispositivo de administración. Esto le ayudará a asegurarse de que recibe la dosis completa. Siga el procedimiento descrito en el manual de instrucciones del dispositivo de administración.



⚠ Antes de la inyección, se debe asegurar que la aguja no está bloqueada: Si el indicador de bloqueo de seguridad está en rojo, la aguja está bloqueada y no se puede usar (ver paso 5). Quite la aguja (ver paso 6), y coloque una nueva.

4 Inyección


- Seleccione la dosis necesaria según lo descrito en el manual de instrucciones del dispositivo de administración.
- Inserte la aguja bajo su piel utilizando la técnica de inyección aconsejada por su profesional sanitario. Para asegurarse de que dispone de una superficie más firme en el punto de inyección, coja un pellizco de piel.
- Inyecte el medicamento según lo descrito en el manual de instrucciones del dispositivo de administración. **Mantenga NovoFine® Autocover® presionada contra la piel como se muestra en la imagen 4, para asegurarse de que la aguja permanece completamente insertada durante la inyección.**
- Mantenga la aguja completamente insertada y **cuente lentamente hasta 6**. Esto garantiza que se ha administrado la dosis completa.
- Retire la aguja de la piel. Es posible que aparezcan en la piel unas gotas del medicamento. Esto es medicamento que se ha acumulado en la cubierta al comprobar el flujo. No afecta a la dosis administrada.



⚠ Mantenga la aguja completamente insertada durante la inyección para asegurarse que recibe la dosis completa. **Para personas que usan insulina**, si la dosis completa no se ha administrado, puede producir un aumento de sus niveles de azúcar en sangre.


5 Bloqueo de seguridad

Cuando saque la aguja de la piel, se activará el bloqueo de seguridad y el indicador de bloqueo de seguridad se volverá rojo. El indicador rojo de bloqueo de seguridad indica que la aguja ha sido bloqueada y que no se puede volver a usar. El indicador rojo de bloqueo **no le indica** que la dosis ha sido administrada.

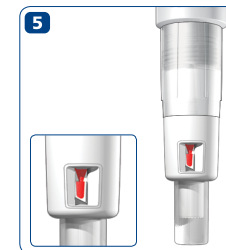

6 Retirada de la aguja

- Después de la inyección, vuelva a colocar el capuchón de la aguja y desenrosque.
- Deséchela cuidadosamente según lo indicado por su profesional sanitario.

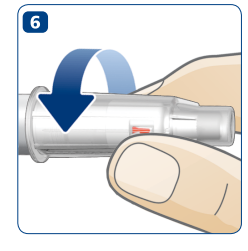

Puede ser utilizado con: FlexPen®, FlexTouch®, Innolet®, NovoPen®, NovoPen Echo®, Ozempic®, Saxenda®, Victoza®, Xultophy® (® de Novo Nordisk A/S), FlexPro®, Norditropin® NordiFlex®, NordiPen® (® de Novo Nordisk Health Care AG), AutoPen®, BerliPen®, Byetta Pen®, ClikStar®, HumaPen®, KwikPen®, SoloStar®, TactiPen® (® de sus respectivos propietarios).

Para usuarios de la Unión Europea; si su médico y/o usted creen que ha tenido un incidente grave causado por el uso de NovoFine® Autocover®, asegúrese de notificarlo a Novo Nordisk y a su autoridad nacional.

Fecha de expedición: 2019-05

CE
0123

novonordisk.com

© 2019
Novo Nordisk A/S
Novo Allé,
DK-2880 Bagsvaerd, Dinamarca

